

Catálogo Insumos de Esterilización

Indicadores



PRO-CLINIC
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

Sello para contenedor sin control

ITEM	: CANDADO PARA CONTENEDOR
COLOR	: AZUL
PRESENTACION	: BOLSAS DE 1000 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- Sello plástico tipo candado.
- Plástico resistente a altas temperaturas, libre de látex.
- Color Azul.



Sello para contenedor con control

ITEM	: CANDADO PARA CONTENEDOR CON CONTROL QUIMICO
COLOR	: ANARANJADO
PRESENTACION	: BOLSAS DE 1000 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- Candado para contenedor con control químico para vapor
- Plástico resistente a altas temperaturas, libre de látex
- Color naranja



Filtro redondo para contenedores con control

MARCA	: ESTERILPAK
PROCEDENCIA	: CHINA
PRESENTACIÓN	: CAJA DE 500 UNIDADES



DESCRIPCIÓN

- Filtro de papel para contenedores, para esterilización en vapor
- De uso único, desechable
- Hidrófugo
- Con testigo de viraje notorio a color café.
- Medida 190 mm, diámetro interno 6mm.
- Libre de metales pesados

Cinta control externo plasma

MARCA : LISTER
PROCEDENCIA : CHINA

DESCRIPCIÓN

- Rollo control externo plasma
- Claro cambio de color
- Fuerte adhesión
- Resistencia a altas temperaturas y a productos químicos
- No tóxico y seguro
- Flexible y fácil de aplicar

DIMENSIONES


Ancho : 19 milímetros
Largo : 50 metros



Cinta control externo vapor

MARCA
PROCEDENCIA

: LISTER
: CHINA

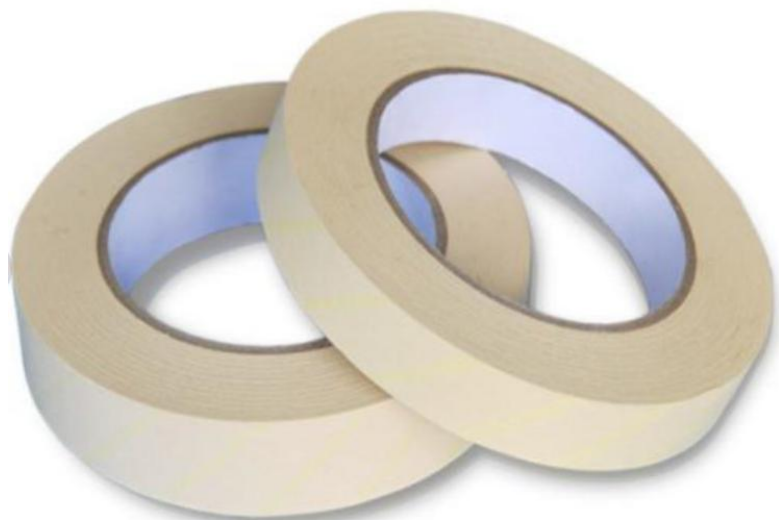

DESCRIPCIÓN

- Rollo control externo vapor
- Claro cambio de color
- Adhesivo fuerte
- Sensible a la temperatura
- Materiales no tóxicos
- Cumple con las normas

DIMENSIONES


Ancho : 19 milímetros
Largo : 50 metros

Indicador multiparámetro tipo 4

MARCA : LISTER
PROCEDENCIA : CHINA
PRESENTACIÓN : CAJA DE 200 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- Los indicadores multiparámetros se depositan en las bolsas, packs o contenedores junto con los instrumentos a esterilizar, de esa forma muestran si se cumplen todas las condiciones de esterilización dentro del paquete o contenedor.
- Da una garantía en el quirófano sobre la esterilidad de los instrumentos, justo antes de su uso.
- Fácil de comprobar el cambio de color ya que el color de referencia está impreso en el integrador.
- Integradores de vapor para 134°C/3,5 min. 250

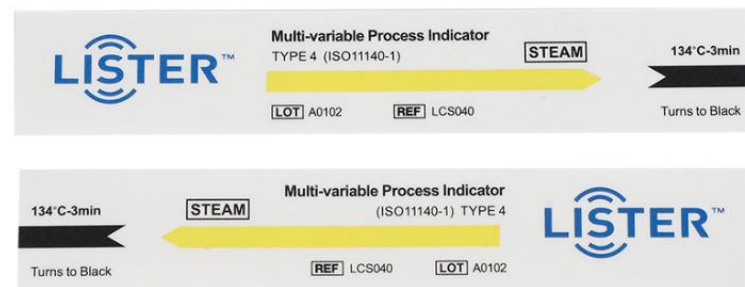

Control biológico para vapor ultra rápido



MARCA
PROCEDENCIA
PRESENTACIÓN

: LISTER
: CHINA
: CAJA DE 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- RESULTADOS EN 20 MINUTOS
- FLUORESCENCIA RÁPIDA Y RESULTADOS EXACTOS
- PRECISIÓN DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN REDUCIDO > 97 %
- CAMBIO DE COLOR DRÁSTICO
- EL KIT INCLUYE AMPOLLAS DE BI Y TUBOS DE MEDIO DE CULTIVO

Control biológico para plasma VH2O2 ultra rápido

MARCA	: LISTER
PROCEDENCIA	: CHINA
PRESENTACIÓN	: CAJA DE 50 UNIDADES



DESCRIPCIÓN

- RESULTADOS EN 20 MINUTOS
- FLUORESCENCIA RÁPIDA Y RESULTADOS EXACTOS
- PRECISIÓN DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN REDUCIDO > 97 %
- CAMBIO DE COLOR DRÁSTICO
- EL KIT INCLUYE AMPOLLAS DE BI Y TUBOS DE MEDIO DE CULTIVO

Incubadora para control biológico



MARCA	: LISTER
PROCEDENCIA	: CHINA
MODELO	: BIOPT1



DESCRIPCIÓN

- LECTURA AUTOMATIZADA Y RESULTADOS RÁPIDOS
- AVISO DE ALARMA MULTIDIRECCIONAL
- PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
- SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ESTERILIZACIÓN
- CAMBIO RÁPIDO ENTRE INTERFACES EN CHINO E INGLÉS

Test Bowie Dick

MARCA	: LISTER
PROCEDENCIA	: CHINA
PRESENTACIÓN	: CAJA DE 100 UNIDADES



DESCRIPCIÓN

EL PAQUETE DE PRUEBA TIPO BOWIE-DICK ESTÁ DISEÑADO PARA COMPROBAR LA EFICIENCIA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DEL ESTERILIZADOR DE VAPOR ASISTIDO POR VACÍO TRAS UN CICLO DE CALENTAMIENTO AL COMIENZO DE CADA DÍA. LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN RECOMENDADOS SON DE 132 A 135 °C Y DE 3 A 3,5 MINUTOS.

Integrador de vapor tipo 5

MARCA : LISTER
PROCEDENCIA : CHINA
PRESENTACIÓN : CAJA 200 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- Los integradores se depositan en las bolsas, packs o contenedores junto con los instrumentos a esterilizar, de esa forma muestran si se cumplen todas las condiciones de esterilización dentro del paquete o contenedor.
- Da una garantía en el quirófano sobre la esterilidad de los instrumentos, justo antes de su uso.
- Fácil de comprobar el cambio de color ya que el color de referencia está impreso en el integrador.
- Verifica las tres variables críticas, temperatura, tiempo y vapor.



Control tipo 4 para plasma, peróxido de hidrógeno

MARCA : LISTER
PROCEDENCIA : CHINA
PRESENTACIÓN : CAJA 200 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

- Tipo 4 | Indicador multivariable
- Ciclos | Se utiliza para la esterilización con VH_2O_2 en un sistema de esterilización a baja temperatura V-PRO
- Características | Verifica dos parámetros críticos: tiempo de exposición y concentración de peróxido de hidrógeno vaporizado



PARA MAS INFORMACIÓN O CONSULTAS

Maria Ignacia León

i.leon@pro-clinic.cl

info@pro-clinic.cl

TEL 224745022

+5698957121